


## 幼禽疫苗自动接种仪（型号：AID-P-20C）——新型幼禽疫苗输送解决方案

幼禽疫苗自动接种仪主要是针对雏鸡、雏鸭、雏鹅等动物的疫苗注射，主要适用于养殖场、孵化场。

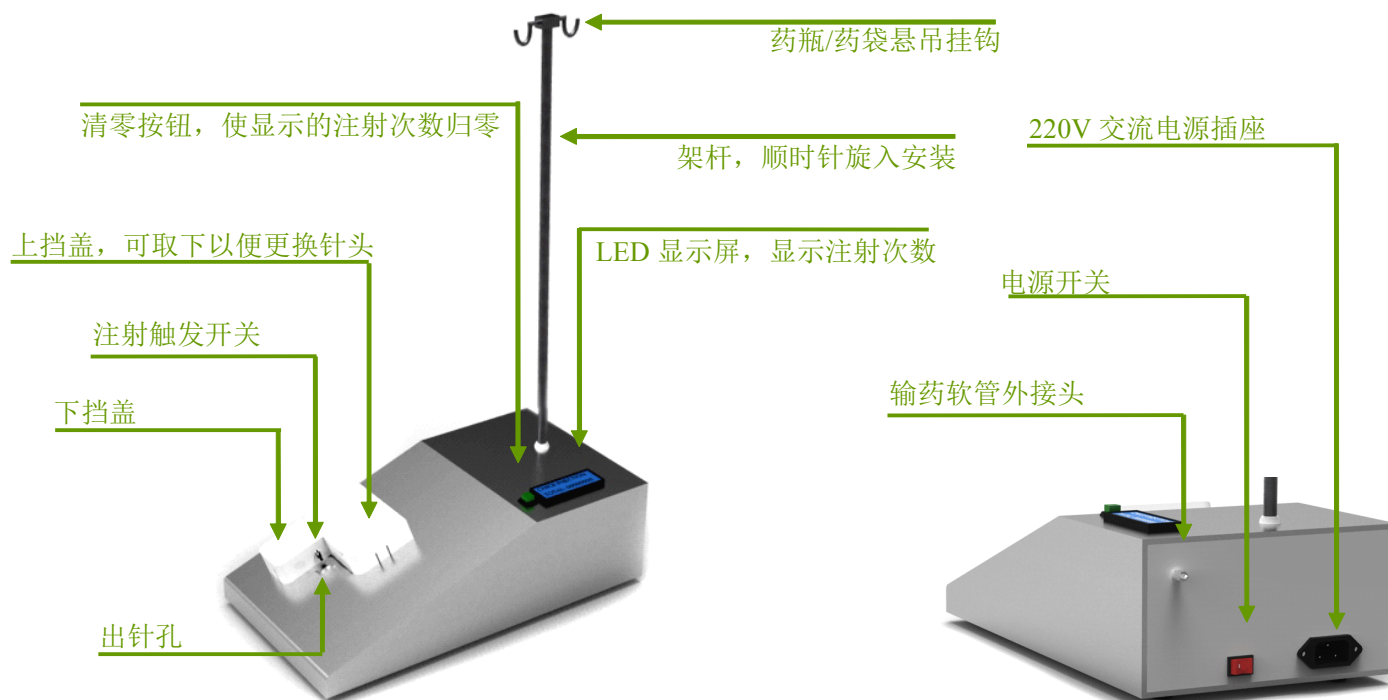

### 产品组成


主体箱 电源接线 架杆 7#针头(20 只) 50ml 注射针筒 (1 只) 医用软管 (一根)

### 主要技术参数

接入电源：220VDC； 功率：50W； 注射剂量：0.2ml； 最大注射速度：3600 羽/小时。

### 安装步骤

#### 1 安装针头

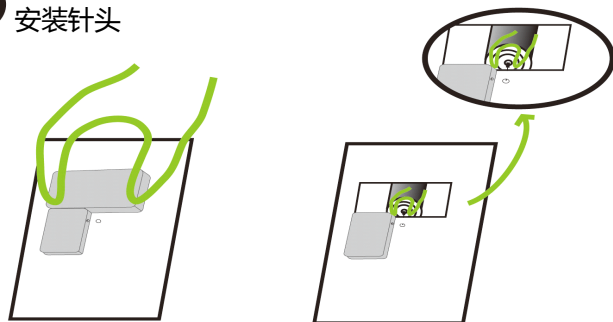


1、按住上挡盖两边的活扣，将上挡盖取下

2、将针头顺时针旋入针座

3、将上挡盖装入原位


#### 2 安装架杆

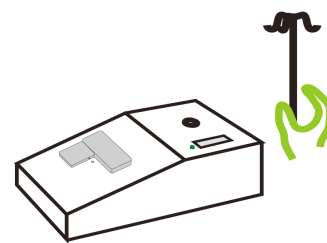


4、取出架杆

#### 3


安装完成

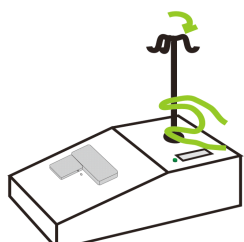









5、将架杆顺时针旋入主体箱上部的孔中

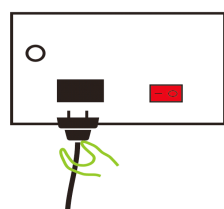

6、将电源线接入后部的插座中

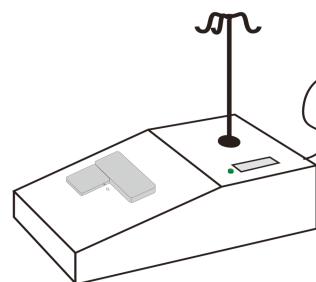

操作步骤

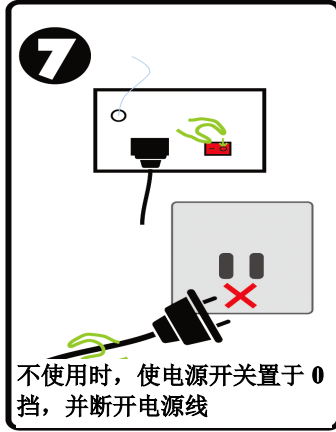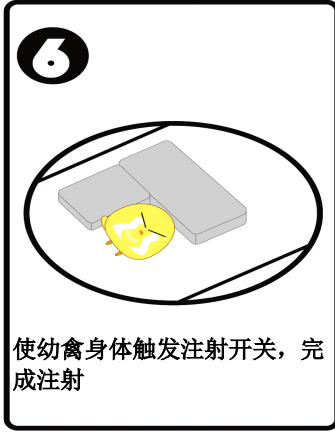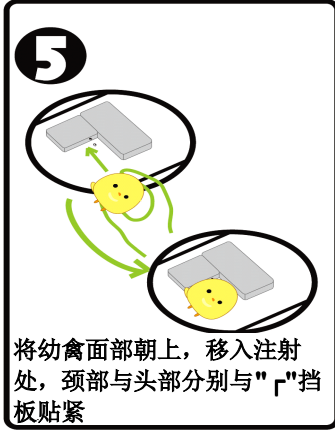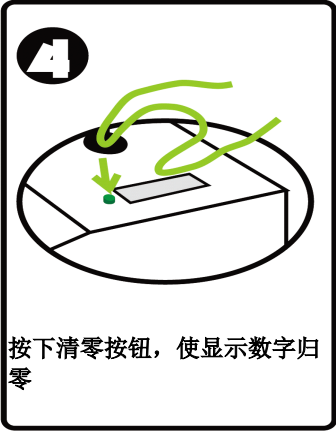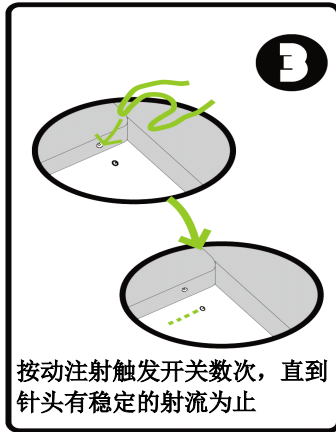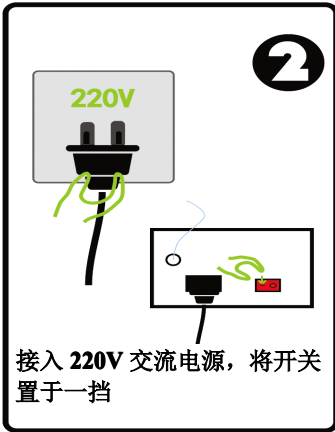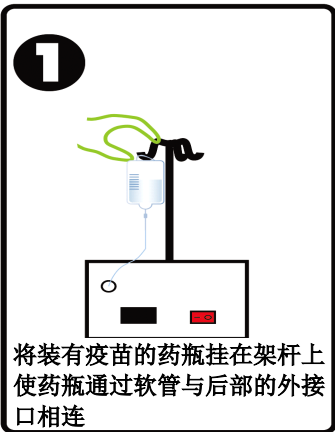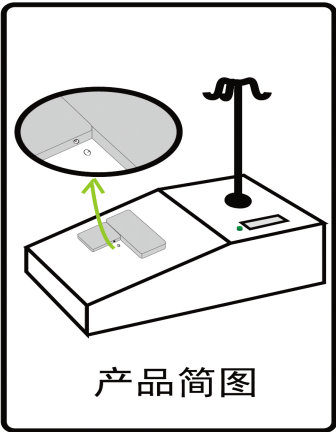

使用说明及注意事项

- 1、当机器发出“滴.....”长鸣时，及注射计数达 100 次；
- 2、需要重新计数时，请按绿色清零按钮，显示注射次数归零；
- 3、不使用时，请使电源开关处于关闭状态；
- 4、在不注射时请勿将手触碰前端的微动开关，以免对人员造成伤害；
- 5、非本公司技术人员请勿打开产品外壳。

故障排除

- 1、针头堵塞（针头正常伸出，但无药液射出），此时机器会发出“滴，滴...”短鸣，关闭电源开关，更换针头即可；
- 2、微动开关在使用过程中如有损坏，请联系公司技术人员，并将下挡盖取下（方法类似安装步骤 1），寄到我公司；
- 3、其他使用故障，请联系公司技术人员。

联系我们

制造商名称：常州中安医疗器械有限公司  
制造商地址：江苏省常州市武进区常武中路 801 号科教城 2 号楼 2517  
公司电话：0519-86339763  
公司传真：0519-86339763  
邮政编码：213164  
公司主页：www.zamedical.com

如果您在使用过程中遇到问题，或对我们有建议或意见，欢迎致电！

|      |  |
|------|--|
| 品名   |  |
| 检测员  |  |
| 检测日期 |  |